

SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ JEDNOSVAZKOVÝM KARTÁČKEM

Pro dokonalé: precizní a zcela šetrné, čištění jednotlivých zubů až pod okraj dásně, dočišťování špatně přístupných míst a pro čištění orthodontického aparátu.




TECHNIKA ČIŠTĚNÍ:



Vláknové pole kartáčku přiložíme na zub k okraji dásně na jedné straně zubu, část vláken lehce (prakticky bez tlaku) zavedeme i pod dásně.




Čistíme jemnými vibračními pohyby nebo drobnými hmity, přičemž posouváme kartáček po oblouku ke druhé straně zubu.

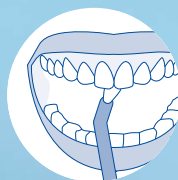

Je důležité kontrolovat, aby se vlákna kartáčku nedostala na dásně - pak by čištění nebylo šetrné.



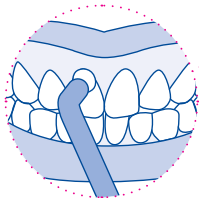

CS 1006

single 6 mm

Tento zubní kartáček je určen pro dokonalé a důkladné čištění zubů až pod okraj dásně (dásňového žlábků), dočišťování špatně přístupných míst v ústech a pro čištění ortodontického aparátu. Osvojení techniky čištění zubů jednosvazkovým kartáčkem CS 1006 je poněkud náročnější než technika čištění zubním kartáčkem, ale vyplatí se. Jedná se o (pro zuby) neefektivnější a (pro dásně) nejšetrnější způsob čištění. Čištění touto technikou je třeba nejprve natrénovat (nejlépe pod dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky), zabere více času (čištění v křesle u televize, na zahradě...), ale výsledek je dokonalý.



CS 1009

single 9 mm

Obtížně čitelná místa okolo fixních rovnátek potřebují speciální péči. Všude tam, kam nedosáhne CS 1006, můžete použít CS 1009 s delšími vlákny. Opět čistíme jemnými vibračními pohyby. Kartáček CS 1009 je vhodný také pro pacienty s parodontálním onemocněním, implantáty a můstky.

